

保証規定

本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に限り、無償修理をさせていただきます。
次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。
①お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷
②誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷
③保管上の不備による故障や損傷
④お客様ご自身による修理や改造によって生じた故障や損傷
⑤故障や損傷の原因がお客様の責任によるものと判断される場合
⑥火災、地震、水害、落雷その他天災ならびに公害、塩害による故障や損傷
⑦本書の提示が無い場合。あるいは、所定事項の未記入、もしくは文字を書きかえられた場合
⑧本書に記載されていない方法で使用した場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。
本書とご購入時のレシート等は、紛失しないように大切に保管してください。本書は再発行致しません。
本書とご購入時のレシート等が無い場合は、保証の対象になりません。
本書によって、本書を発行している者（保証責任者）に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理、アフターサービスについては、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へお申し出ください。
修理やご相談等への対応のため、お客様にいただいた個人情報やご相談内容を記録に残す場合がありますのでご了承ください。

仕様

電源	充電式(リチウムイオン充電池 3.7V 1800mAh)
充電時間 ※1	満充電まで約2.5時間
動作時間 ※1	満充電で計約2時間(エアー強度 弱、モード1の場合)
充電可能回数 ※1※2	約300回
モード	・エアー強度：弱、中、強 ・モード1、モード2、モード3
自動停止タイマー	約15分
使用環境温度	約10~40°C
サイズ	約縦34×ふくらはぎ周り約27~50cm
重量	約360g
素材	生地:ポリエステル バッテリー部:アクリロニトリル・ブタジエン・ステレン共重合樹脂
付属品 ※3	充電用USBケーブル(Type-C 5V/1A)
生産国	中国

※1 実際の時間及び回数は、使用環境や負荷、選択モードにより異なります。


※2 電池容量が約80%未満になるまでの充電回数

※3 ACアダプターは付属しておりません。市販の、USB対応ACアダプター(5V/1~2A)をご使用ください。



取扱説明書 保証書付き

NH8350 レッグエアリフレッシャー

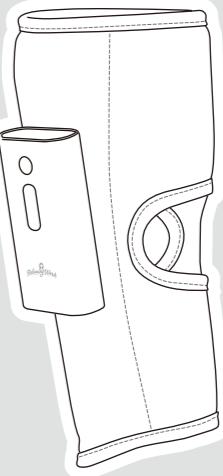

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
読み終わったら後も本書は大切に保管し、必要なときにお読みください。



羽立工業株式会社
〒431-0421 静岡県湖西市新所3
[修理・不具合 相談窓口]
TEL :053-578-1501
MAIL:support@hatachi.jp



はじめに

使用目的

・本製品はふくらはぎ周りに巻き付け、エアーバッグを使って脚を圧迫する道具です。
・医療機器ではありません。

使用対象者

・本製品は、「取扱説明書」を理解して正しく使用することができる18歳以上の方を対象として設計しています。
・ただし、製品の性質上、使用できない方や医師に相談が必要な方にについて安全上の注意(2~4ページ)に記載しているため使用前にご確認ください。
・未成年の方が使用する際は、必ず保護者の監視のもと使用してください。
・乳幼児には使用しないでください。

安全上の注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく使い、ご自身や周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

「警告」、「注意」に区分して明示していますので、必ず守ってください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が軽度または中度の傷害を負う可能性や、財産の損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の内容



禁止事項を示しています。



必ず守る事項を示しています。



○次の方は使用しない。

- ・医師から身体への物理的な圧迫刺激を禁じられている方
- ・意思表示や操作ができない方、取扱説明書の内容を理解できない方
- ・飲酒している方
- ・乳幼児には使用しないでください。未成年者が使用する際は、保護者の監視のもと使用してください。
- ・紫斑ができやすい方

●次の方は、使用前に専門医に相談する。

現在、医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門医にご相談のうえ使用してください。けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
- ・過去に医療機関で治療や手術を受けた部位に使用する方
- ・循環器疾患のある方
- ・妊娠中の方、出産直後の方
- ・糖尿病などによる高度な末梢神経障害からくる知覚障害のある方
- ・皮膚に創傷のある方
- ・安静を必要とする方
- ・体温38°C以上(有熱期)の方
- ・骨粗鬆症(筋)症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の方
- ・けんこう(腱鞘)炎の方



●次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・「使用目的」以外の用途では使用しないでください。
- ・本書に記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。
- ・本製品を使用する際は、装身具(スリップやアンクレット、ベルトなど)を外してください。
- ・自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。
- ・他の器械や美容機器などと併用しないでください。
- ・視覚障害のある方は一人で使用しないでください。けがや体調不良の原因となります。
- ・子供が使用したり、遊ばないように注意してください。また、子供の手の届かないところで保管してください。けがや故障の原因となります。
- ・故障やカバーベースが破れた場合は、直ちに使用を中止し電源を切り、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

●次の注意事項を守ること。

事故や故障、感電の原因となります。

- ・鋭利なもの(針など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたり、落下させるなど過度な力を加えないでください。内蔵電池が発熱、破裂、発火する可能性があります。
- ・浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所では使用や充電をしないでください。感電や発火の原因となります。
- ・分解、改造、修理はしないでください。不具合が発生した場合は、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。
- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で使用したり、放置や保管をしないでください。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・ごたつや布団などで覆ったり、包んだ状態で使用しないでください。事故や火災の原因となります。
- ・本体から異音がする場合や、温度異常などが生じた場合は直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめ、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となります。
- ・内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類につけないでください。目や皮膚への傷害を起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合は、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後、直ちに医師の診療を受けてください。
- ・本体の充電ポートに、導電性の異物(金属類等)や液体、ホコリなどの異物が入らないようにしてください。



●充電用USBケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

感電や故障、火災の原因となります。

- ・充電する際は、付属の充電用USBケーブルを使用してください。
- ・充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ご使用前に、充電用USBケーブルに損傷や異常が無いか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ・充電用USBケーブルのUSBプラグを抜く際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。



●次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・ご使用前に下記のことを確認してください。
 - 本製品に損傷がないか
 - 電源を入れてみて正常に動くか、また異音や異臭などの異常がないか
 - 損傷や異常がある場合は使用しないでください。故障、感電、けがの原因となります。
 - 使用中は眠らないでください。けがの原因となります。
 - 初めてお使いになる際は、脚と本体の間に充分な隙間を持たせて巻き付けてください。締め付けすぎによるケガなどの原因となります。
 - はじめてお使いになる際は、弱いモードからお試しください。慣れるまでは、1日1回5分以内を使用時間の目安してください。
 - 1回の使用時間は15分以内を目安とし、1日の使用は2回までとしてください。過度な刺激となりけがの原因となります。
 - 使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は使用を中止し、医師に相談してください。
 - ペットには使用しないでください。また、ペットが本製品で遊ばないようにしてください。

●次の注意事項を守ること。

事故や故障の原因となります。

- ・本体を装着した状態で歩行しないでください。
- ・充電用USBケーブルを接続したまま本体を移動させないでください。
- ・付属の充電用USBケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。充電完了後そのままの状態で放置されると、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。

各部の名称と機能

本体



電源ボタン

モードボタン

エアーボタン

充電ポート



充電する

① 充電用USBケーブルを、本体に接続する

付属の充電用USBケーブルのUSBプラグ(Type-C)を、本体の充電ポートに接続します。



△警告
・濡れた手で充電用USBケーブルの抜き差しはしないでください。

△注意

・接続部が合致していても、付属以外の充電用USBケーブルを使用しないでください。付属以外のケーブルを使用した場合、正常に充電できないあるいは電圧が異なり発火する可能性があります。
・充電は約10~40°Cの室内で行ってください。温度範囲以外の環境で充電すると、電池の発熱、破損の原因となります。


② 充電用USBケーブルを、ACアダプターに接続する

充電用USBケーブルのUSBプラグ(Type-A)を、市販のACアダプターに接続します。

△注意

・市販のUSB対応ACアダプター(5V/1~2A)を使用してください。適応外の出力アダプターを使用した場合、製品が破損したり、充電時間が長くなる場合があります。

③ ACアダプターをコンセントに接続する

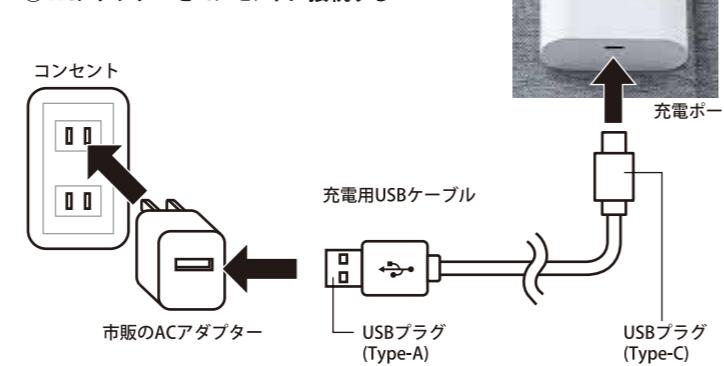

8

9

10

11

使う

① イスやソファなどに座る

② 本体を装着する

本体のベルクロをめくり、脚のふくらはぎに本体を巻き付けて装着します。

・初めてお使いになる際は、脚と本体の間に充分な隙間を持たせて巻き付けてください。締め付けすぎによるけがなどの原因となります。

・本体を装着した状態で歩行しないでください。



③ 電源を入れ、使用する



電源ボタン(○)を長押しします。電源が入り、表示パネルのライトが点灯します。
はじめはモード1、エア強度 弱で動作が開始します。



△注意
・本製品を初めて使用する場合や、しばらく使用していなかった場合は、ご使用の前に操作ボタンを押し、正常に動作するか確認してください。
・1回の使用時間は15分以内を目安としてください。
・1日の使用は1部位に対し2回までとしてください。過度な刺激となりけがの原因となります。
・慣れるまでは、1日1回5分以内を使用時間の目安としてください。体調不良やけがの原因となります。

④ モードを切り替える

モードボタン(M)で好みのモードを選択できます。
ボタンを押すたびに、選択モードが切り替わります。
(モード1→モード2→モード3→停止→モード1…)

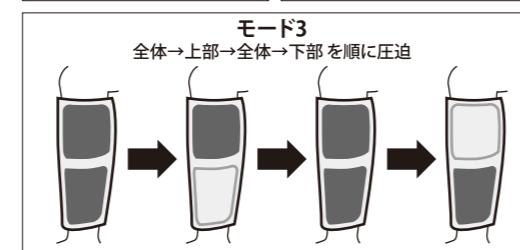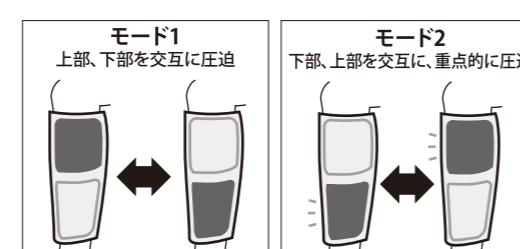

⑤ エア強度を切り替える

エアーボタン(■)で好みのエア強度を選択できます。
ボタンを押すたびに、エア強度が切り替わります。
(弱→中→強→弱…)

⑥ 使用を終了する


動作が始まってから約15分経過するとタイマーにより自動で動作が停止し、電源が切れます。
動作中に使用を中断する際は、電源ボタン(○)を長押しします。



④ 充電の状態を確認する

表示パネル中央 電池マークのランプで、充電の状態を確認してください。

- ・ランプが点滅: 充電中
- ・ランプが点灯: 充電完了

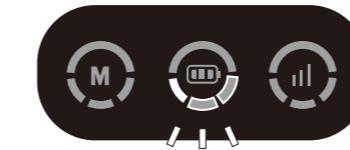

⑤ 充電完了

充電が完了したら、充電用USBケーブルを充電ポートから取り外してください。
その後、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

・充電が空の状態から満充電になるまで約2時間かかります。
・1回の満充電で、モード1の場合、合計約2時間使用できます。(実際の時間は、使用環境や負荷により異なります。)

△警告

・所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

△注意

・充電完了後そのままの状態で放置されると、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかに充電用USBケーブルを外してください。
・ケーブル類のプラグを取り外す際は、ケーブルを持たずには必ずプラグを持って取り外してください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。

お手入れと保管

本体のお手入れ方法

- ① 電源が切れていることを確認してください。
- ② 本体の充電ポートから、充電用USBケーブルを取り外してください。
- ③ 乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ④ 生地部分のみ、汚れがひどい場合は水をぬめるま湯で濡らして硬く絞ったスポンジや柔らかい布でふき取ってください。その後乾いた布で乾拭きしてください。
- ・ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油、除光液、薬品等は使用しないでください。
- ⑤ 風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

△注意

・濡らした布等を使用する場合は、各種操作ボタンや充電ポートは避け、生地部分のみ拭き取ってください。
・本体に水をかけたり、流水で洗ったりしないでください。内部に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。

保管方法

- ・充電ポートから、充電用USBケーブルの接続プラグを取り外してください。
- ・充電用USBケーブルは、しばらくいたりねじたりせず保管してください。
- ・落しない安定した場所で保管してください。
- ・本製品の上に物を置かないでください。
- ・長期間使用しない場合は、満充電にしてから保管してください。また、3ヶ月ごとを目安に本品を作動させ、再度充電してください。充電池は未使用時も少しづつ放電しているため、長期間充電せずにおくと過放電が起こり、充電が出来なくなる場合があります。

△注意

・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で保管しないでください。本体にはリチウムイオン充電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
・子供の手が届く場所やベットが触れることができる場所で保管しないでください。けがや事故の原因となります。
・充電用USBケーブルのプラグを取り外す際は、ケーブルを持たずには必ずプラグを持って取り外してください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。

廃棄方法

- ・本製品には、リサイクル可能なリチウムイオン充電池が内蔵されています。不要になった製品は他の家庭ごみと一緒に廃棄せず、お住まいの自治体のルールに従い、適切に廃棄してください。



故障かなと思ったら

不具合が発生した場合は、修理を依頼する前に下記項目を確認してください。改善しない場合は本書とご購入時のレシート等をご準備のうえ、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

・電源ボタンを長押ししても電源が入らない

→充電が切れている可能性があります。充電してからご使用ください。
→充電中は電源が入ません。充電が完了してから使用してください。

→長押しする時間が短い可能性があります。電源ボタンを約2秒間長押ししてください。

・充電ができない

→ACアダプターのACプラグがコンセントに正しく接続できていない、または充電用USBケーブルのプラグが本体の充電ポートに正しく接続できていない可能性があります。奥まで強く挿し込んでください。
→周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10~40°Cで充電をしてください。

・動作時間が短い

→内蔵電池の寿命の可能性があります。リチウムイオン充電池には寿命があり、充電・放電を繰り返すうちに消耗していきます。継続して使用したい場合は、新しい製品に買い替えてください。
→購入後はじめての充電や、長期未使用後の充電の場合、動作可能時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

・動作が停止する

→約15分間の動作後、自動停止機能が働きます。異常ではありません。
→充電が切れている可能性があります。再度充電してください。

・使用部位にしびれや痛みが出る

→強度が強すぎる可能性があります。使用強度を「弱」にして使用してください。また、脚と本体の間に充分な隙間を持たせて巻き付けてください。締め付けすぎによるけがなどの原因となります。
→しびれや痛みが続く場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。

12

13

14

15