

保証規定

本書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合に限り、無償修理をさせていただきます。
次の場合は保証期間中であっても有償修理となります。

- ①お買い上げ後の移動、あるいは輸送によって生じた故障や損傷
- ②誤った使用方法や、お客様の不注意によって生じた故障や損傷
- ③保管上の不備による故障や損傷
- ④お客様ご自身による修理や改造によって生じた故障や損傷
- ⑤故障や損傷の原因がお客様の責任によるものと判断される場合
- ⑥火災、地震、水害、落雷その他天災ならびに公害、塩害による故障や損傷
- ⑦本書の提示が無い場合。あるいは、所定事項の未記入、もしくは文字を書きかえられた場合
- ⑧本書に記載されていない方法で使用した場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。

本書とご購入時のレシート等は、紛失しないように大切に保管してください。本書は再発行致しません。

本書とご購入時のレシート等が無い場合は、保証の対象になりません。

本書によって、本書を発行している者（保証責任者）に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間が経過した後の修理、アフターサービスについては、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へお申し出ください。


修理やご相談等への対応のため、お客様にいただいた個人情報やご相談内容を記録に残す場合がありますのでご了承ください。



取扱説明書 保証書付き

NH8750

エアーフットマッサージャー EMK-701

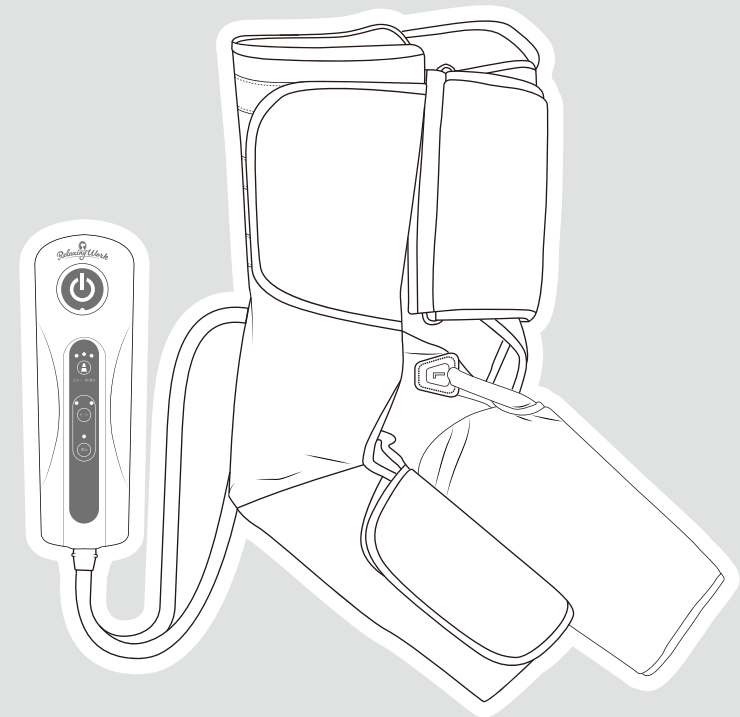

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
読み終わった後も本書は大切に保管し、必要なときにお読みください。



羽立工業株式会社

〒431-0421 静岡県湖西市新所3

[修理・不具合 相談窓口]

TEL : 053-578-1501 平日9~17時

MAIL: support@hatachi.jp →



はじめに

使用目的

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
エアークッションを使って脚を加圧マッサージする管理医療機器です。

安全上の注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しく使い、ご自身や周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。「警告」、「注意」に区分して明示していますので、必ず守ってください。

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	 注意	誤った取扱いをすると、人が軽度または中度の傷害を負う可能性や、財産の損害が発生する可能性がある内容を示しています。
--	---	---	---

絵表示の内容

 禁止事項を示しています。	 必ず守る事項を示しています。
--	---

警告

次の方は使用しない。

- ・医師からマッサージを禁じられている方
例：血栓（塞栓）症、重度の動脈リゅう（瘤）、急性静脈リゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む。）など
- ・意思表示ができない方、操作ができない方、取扱説明書の内容を理解できない方
- ・飲酒している方
- ・乳幼児には使用しないでください。未成年者が使用する際は、保護者の監視のもとで使用してください。
- ・紫斑になりやすい方

次の方は、使用前に専門医に相談する。

現在、医師の治療を受けている方や下記の方は、必ず専門医にご相談のうえ使用してください。けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・心臓に障害のある方
- ・妊娠初期の不安定期 又は出産直後の方
- ・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある方
- ・皮膚に創傷のある方
- ・安静を必要とする方
- ・体温38℃以上（有熱期）の方 例：急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方や、衰弱している方
- ・骨粗しょう（鬆）症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう（疼）痛性]疾患の方
- ・その他、医療機関で治療中の方
- ・けんしょう（腱鞘）炎の方

次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・マッサージ以外の目的で使用しないでください。
- ・本書に記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。
- ・脚以外の部位には使用しないでください。
- ・本製品を使用する際は、装身具（スリッパやアンクレット、ベルトなど）を外してください。
- ・自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。
- ・他の医療機器や美容機器などと併用しないでください。
- ・視覚障害のある方は一人で使用しないでください。けがや体調不良の原因となります。
- ・子供が本製品で遊んだり、上に乗ったりしないように注意してください。

使用対象者

- ・本製品は、「取扱説明書」を理解して正しく使用することができる18歳以上の方を対象として設計しています。ただし、製品の性質上、使用できない方や医師に相談が必要な方について安全上の注意(1～2ページ)に記載しているため使用前にご確認ください。
- ・未成年の方が使用する際は、必ず保護者の監視のもとで使用してください。
- ・乳幼児には使用しないでください。

警告

次の注意事項を守ること。

事故や故障、感電の原因となります。

- ・必ずAC100Vの電源で使用してください。それ以外の電源を使用した場合、故障や火災の原因となります。
- ・分解、改造、修理はしないでください。
- ・故障やカバー生地が破れた状態が発生した場合は、使用を直ちに中止し電源を切り、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。
- ・カバー生地が破れた状態では使用しないでください。
- ・鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたり、落下させるなど過度な力を加えないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ・浴室や洗面所などの水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。感電や発火の原因となります。
- ・こたつや布団などで覆ったり、包んだ状態で使用しないでください。事故や火災の原因となります。
- ・高温になる場所（直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など）で使用したり、放置や保管をしないでください。

ACアダプターやケーブルを取り扱う際、次の注意事項を守ること。

感電や故障、火災の原因となります。

- ・ACアダプターやケーブルを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、引っばったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ご使用前に、ACアダプターやケーブルに損傷や異常が無いか確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- ・ケーブル類のプラグを取り外す際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って取り外してください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。
- ・濡れた手でACアダプターに触れないでください。

注意

次の注意事項を守ること。

けがや体調不良、事故の原因となります。

- ・使用中は眠らないでください。けがの原因となります。
- ・はじめてお使いになる際は、脚と本体の間に十分な隙間を持たせて巻き付けてください。締め付けすぎによるケガなどの原因となります。
- ・はじめてお使いになる際は、弱いモードからお試ください。慣れるまでは、1日1回5分以内を使用時間の目安としてください。
- ・1回の使用時間は10分以内を目安とし、1日の使用は2回までとしてください。過度な刺激となりけがの原因となります。
- ・しばらく使用しても効果があらわれない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、赤みや炎症などの異常が生じた際は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・ペットには使用しないでください。また、ペットが本製品で遊ばないようにしてください。


次の注意事項を守ること。

事故や故障の原因となります。


- ・本体を装着した状態で歩行しないでください。
- ・ACアダプターを接続したまま本体を移動させないでください
- ・付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・停電した場合は、直ちにACアダプターをコンセントから取り外してください。

各部の名称と機能

本体

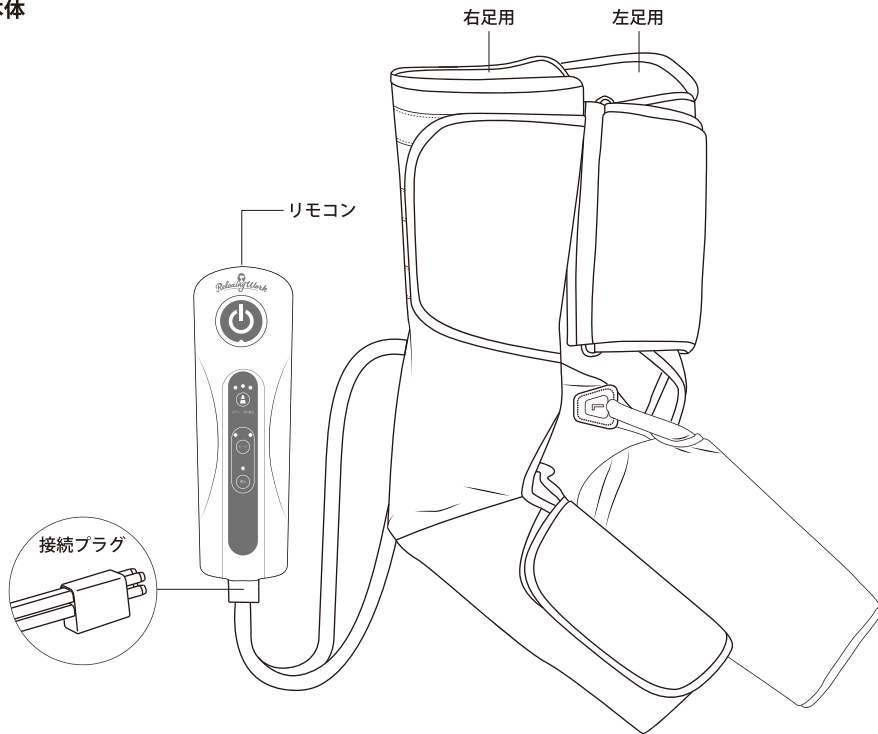

リモコン

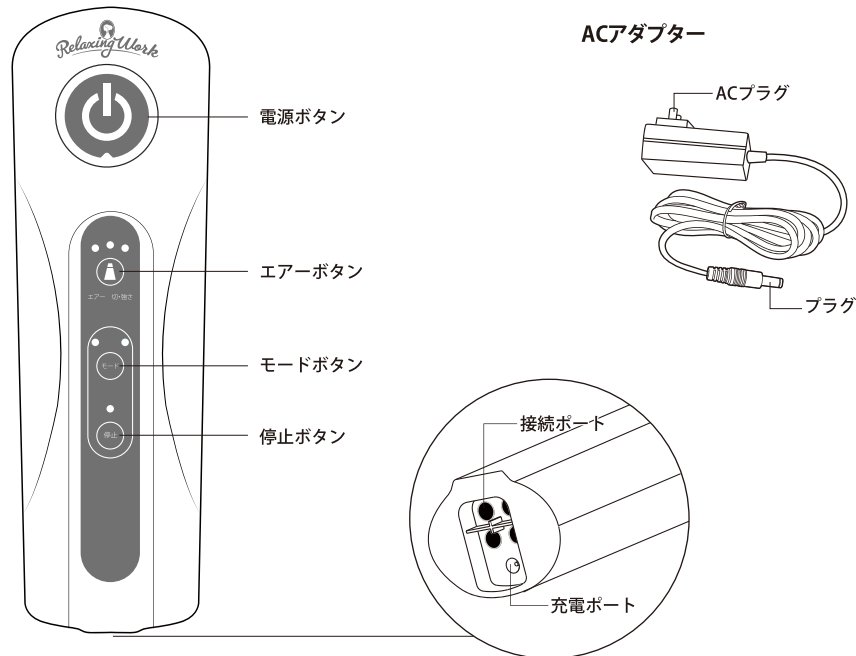


充電する

① ACアダプターとリモコン(充電体内蔵)を接続する

付属しているACアダプターのプラグを、リモコンの充電ポートに接続します。

② ACアダプターをコンセントに接続する

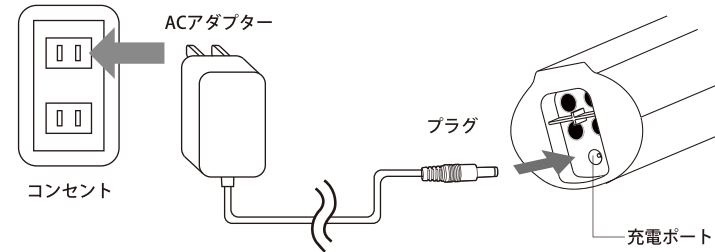

全てのケーブルは容易に離脱しないように、正しく奥まで深く挿し込んでください。

③ 充電の状態を確認する


リモコンの電源ボタンのランプで、充電の状態を確認してください。

- ・赤色ランプが点滅: 充電中
- ・赤色ランプが消灯: 充電完了

電源ボタンのランプが点滅していない場合は充電ができていません。正しく接続できているか確認してください。

赤色ランプ点滅: 充電中

赤色ランプ消灯: 充電完了

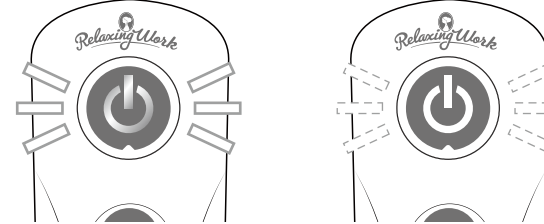

④ 充電完了

充電が完了したら、ACアダプターのプラグをリモコンの充電ポートから取り外してください。

その後、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

- ・充電が空の状態から満充電になるまで約2.5時間かかります。
- ・1回の満充電で、モード1の場合約3時間使用できます。(実際の時間は、使用環境や負荷により異なります)

△警告

・所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。電池が発熱、破裂、発火の原因となります。

△注意

・充電完了後そのままの状態では放置されず、過充電となり内蔵電池消耗の原因となります。充電完了後は速やかにACアダプターを取り外してください。

・充電は室内(15~35℃)の環境で行ってください。温度範囲以外の環境で充電すると、電池の発熱、破損の原因となります。


・ケーブル類のプラグを取り外す際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って取り外してください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。

使用する

① リモコンを本体と接続する

ACアダプターのプラグをリモコンから取り外してください。
リモコンの接続ポートに、本体から伸びるケーブルの接続プラグを接続します。奥まで深く挿し込んでください。

・ACアダプターのプラグがリモコンに挿入されている場合は電源が入りません。

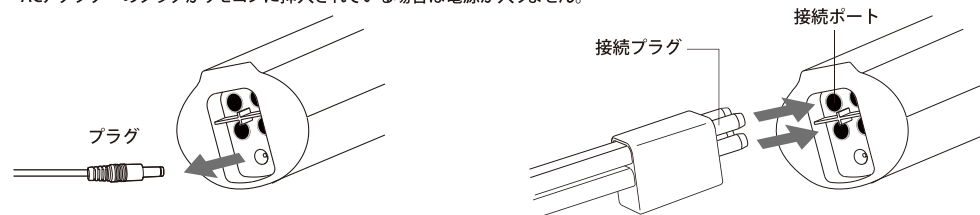

全てのケーブルは容易に離脱しないように、正しく奥まで深く挿し込んでください。


② イスやソファなどに座る

③ 本体を装着する

本体のベルクロをめくってゆるめ、脚が通せる状態にします。
両脚のふくらはぎと足部に本体を巻き付けて装着します。
ケーブル根元のR・L表記(R:右脚、L:左脚)を確認し、適正な脚に装着してください。

△注意

・はじめてお使いになる際は、脚と本体の間に十分な隙間を持たせて巻き付けてください。締め付けすぎによるケガなどの原因となります。
・本体を装着した状態で歩行しないでください。

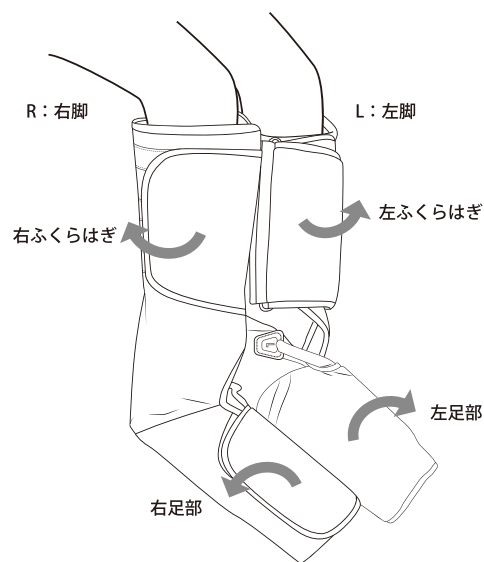

④ 電源を入れ、使用する

電源ボタンを押します。電源が入り、ライトが点灯し、モード1、エアージェット弱で動作が開始します。

・動作中に停止ボタン(●)を押すと、動作のみ一時停止させることができます。再開する場合はモードボタン(●)を押してください。

△注意

・本製品をはじめて使用する場合や、しばらく使用していなかった場合は、ご使用前に操作ボタンを押し、正常に動作するか確認してください。
・1回の使用時間は10分以内を目安としてください。
・1日の使用は2回までとしてください。過度な刺激となりけがの原因となります。
・慣れるまでは、1日1回5分以内を使用時間の目安としてください。体調不良やけがの原因となります。

⑤ エアージェットを切り替える


エアージェットボタンで好みのエアージェット強度を選択できます。
ボタンを押すたびに、エアージェット強度が切り替わります。(弱→中→強→弱…)

⑥ モードを切り替える

モードボタンで好みのモードを選択できます。
・モード1(左点灯): ふくらはぎ+足部→ふくらはぎ→足部を順に圧迫
・モード2(右点灯): ふくらはぎと足部を交互に圧迫

⑦ 使用を終了する

動作が始まってから約10分経過するとタイマーにより自動で動作が停止し、電源が切れます。
動作中に使用を中断する際は、電源ボタン(●)を押します。

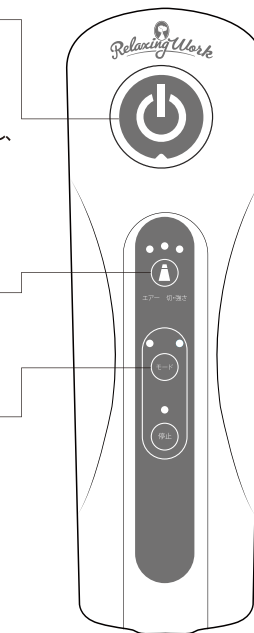

お手入れと保管

本体のお手入れ方法

- ①電源が切れていることを確認してください。
- ②ACアダプターをリモコンから取り外してください。
- ③リモコンの接続ポートから、本体から伸びるケーブルの接続プラグを取り外してください。
- ④乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ⑤汚れがひどい場合は、水かぬるま湯で濡らして硬く絞ったスポンジや柔らかい布でふき取り、その後乾いた布で乾拭きしてください。
 - ・ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油、除光液、薬品等は使用しないでください。
- ⑤風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

△注意

- ・濡らした布等を使用する場合は、ケーブルのプラグを避けて拭き取ってください。
- ・本体に水をかけたり、流水で洗ったりしないでください。内部に水が入るとショートして感電や発火の原因となります。

保管方法

- ・ACアダプターをコンセントから取り外し、リモコンから伸びる充電ポートからACアダプターのプラグを取り外してください。
- ・リモコンの接続ポートから、本体から伸びるケーブルの接続プラグを取り外してください。
- ・ケーブル類はしばったりねじったりせず保管してください。
- ・落下しない安定した場所で保管してください。
- ・本品の上に物を置かないでください。
- ・長期間使用しない場合は、本品を満充電してから保管してください。また、3か月ごとを目安に本品を動作させ、再度充電してください。充電電池は未使用時も少しずつ放電しているため、長期間充電せずにおくと過放電が起こり、充電が出来なくなる場合があります。

△注意

- ・高温になる場所(直射日光が当たる場所、暖房器具や火気のそば、炎天下の車内など)で合使用したり、放置や保管をしないでください。本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。内蔵電池が漏液、膨張、発熱、発火、破裂する可能性があります。
- ・子供の手が届く場所やベットが触れることができる場所で保管しないでください。けがや事故の原因となります。
- ・ケーブル類のプラグを取り外す際は、ケーブルを持たずに必ずプラグを持って取り外してください。ケーブルを引っ張ると断線して発火の原因となります。

廃棄方法

- ・本製品には、リサイクル可能なリチウムイオン充電電池が内蔵されています。不要になった製品は他の家庭ごみと一緒に廃棄せず、お住まいの自治体のルールに従い、適切に廃棄してください。

△注意

- ・家庭ごみと一緒に廃棄すると、内蔵電池が発熱、発火して火災などの原因となります。



故障かなと思ったら

不具合が発生した場合は、修理を依頼する前に下記項目を確認してください。改善しない場合は本書とご購入時のレシート等をご準備のうえ、お買い上げ販売店または弊社相談窓口へご連絡ください。

・電源ボタンを押しても電源が入らない

- 充電が切れている可能性があります。充電してからご使用ください。
- ACアダプターのプラグがリモコンに挿入されている場合は電源が入りません。ACアダプターのプラグをリモコンから外してください。
- リモコンの充電ポートと本体から伸びるケーブルの接続プラグが正しく接続できていない可能性があります。奥まで強く挿し込んでください。

・充電ができない、または動作時間が短い

- ACアダプターのACプラグがコンセントに正しく接続できていない、またはACアダプターのプラグとリモコンの充電ポートが正しく接続できていない可能性があります。奥まで強く挿し込んでください。
- 内蔵電池の寿命の可能性があります。継続して使用する場合は、新しい製品に買い替えてください。
- 周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度15～35℃で充電を行ってください。
- 購入後はじめての充電や、長期未使用後の充電の場合、動作可能時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

・動作が停止する

- 約10分間の動作後、自動停止機能が働きます。異常ではありません。
- 充電が切れている可能性があります。再度充電してください。

仕様

一般的名称	家庭用エアマッサージ器
医療機器区分	管理医療機器
医療機器販売名	エアフットマッサージャー EMK-701
品番	NH8750
医療機器認証番号	305AKBZX00018000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
使用電源	リチウムイオン充電電池 (AC100V 50/60Hz 11.1V 1,000mAh)
定格電力	12W
充電時間 ※1	満充電まで約2.5時間
電池持続時間 ※1	満充電で約3時間(モード1、エア強度 弱の場合)
モード	・エア強度：弱、中、強 ・モード1(左点灯)、モード2(右点灯)
自動停止タイマー	約10分
使用環境温度	約10～40℃
付属品	・リモコン ・ACアダプター (型番:IVP1350-1000WP)
製造販売業者	株式会社NAIPO CARE JAPAN 大阪市中央区北浜東1-12天満橋フジタビル8階
販売業者	羽立工業株式会社 静岡県湖西市新所3
生産国	中国

※1 実際の時間及び回数は、使用環境や負荷、選択モードにより異なります。